

Polhernia®

T-SLING

su Biosorb™



Naujoviška netempianti uretrinė priemonė

Šlapimo sulaikymo ir uretrinės erozijos prevencijai
Daugeriopo įtaisymo galimybės • Gerokai sumažėja išlaidos

T-Sling su Biosorb™

Puikus chirurginis moterų stresinio šlapimo nelaikymo gydymas

T-Sling – tai dviejų komponentų netempianti priemonė, skirta šlapimo sulaikymo ir uretrinės erozijos komplikacijų, sukeltų kitų paraiščių, prevencijai.

T-Sling yra unikalus gaminytis; Biosorb polidioksanono centrinė dalis visiškai absorbuojama per 100 dienų vystant hidrolizei, o dvi biologiškai suderinamos neabsorbuojamos dalys iš viengijo polipropileno tinklelio tvirtai prisitvirtina prie audinio spartaus fibroblastinio jaugimo būdu. Rezultatas – iškart atstatomas šlapimo sulaikymas, nepatiriant problematiško ilgalaikio šlaplės spaudimo, kuris būdingas raiščiams be Biosorb.


Įrodyta, kad T-Sling su Biosorb ilgalaikiai rezultatai yra puikūs. Apie šlapimo nelaikymą ar sergamumą po operacijos nepranešta. Vėlesnius 54 mėnesius veiksmingumas yra 96,7%.

Šią priemonę lengviau įstatyti chirurgui.

Minimaliai invazinė T-Sling procedūra trunka trumpiau nei 30 minučių. Ji atliekama taikant vietinį, sritinį ar bendrąją nejautrą. Priemonė parengta implantuoti į makštį, virš gaktos arba per obturatoriaus angas – būdą pasirenka chirurgas. T-Sling galima naudoti su įvairiais parduodamais kaulų inkarais ir susiuvimo priemonėmis.

T-Sling unikalus rantištas įvedimo galiukas ir aptaki traukimo kilpa palengvina įsiskverbimą, o apsauginis talpinimo apvalkalas bei viengijės polipropileno siūlės suteikia galimybę priemonę lengvai įdėti.




Kadangi T-Sling dedamas šlapimo pūslės kaklelyje, po šlaplės raiščiais – šlapimo nelaikymo šaltinyje – T-Sling su Biosorb yra vienintelis anatomicinio pažeistos vietos atkūrimo būdas.

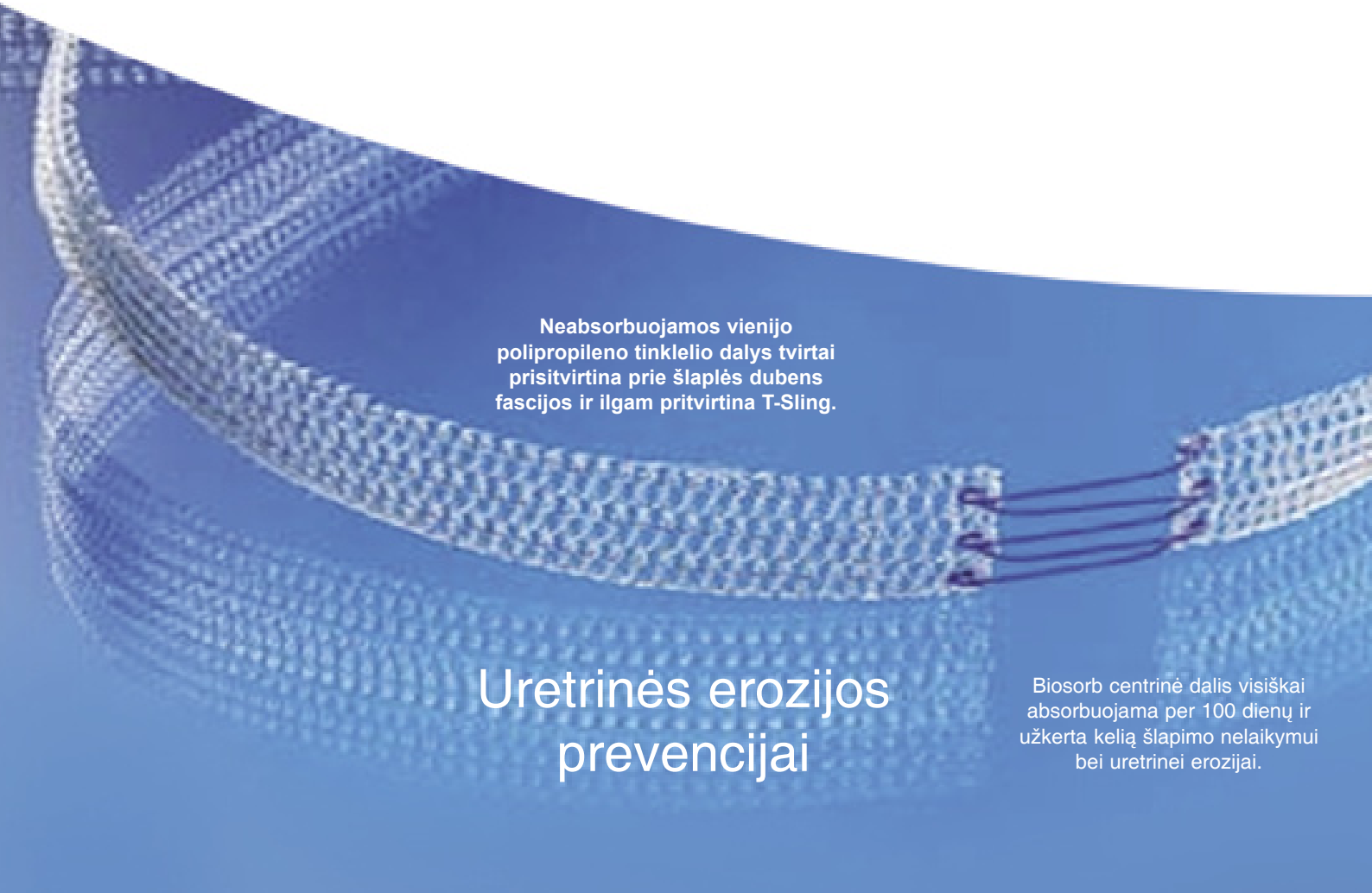

Neabsorbuojamos viengijo polipropileno tinklelio dalys tvirtai prisitvirtina prie šlaplės dubens fascijos ir ilgam pritvirtina T-Sling.

Uretrinės erozijos prevencijai

Biosorb centrinė dalis visiškai absorbuojama per 100 dienų ir užkerta kelią šlapimo nelaikymui bei uretrinei erozijai.

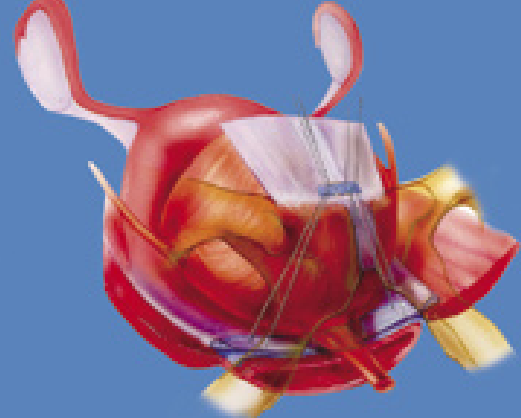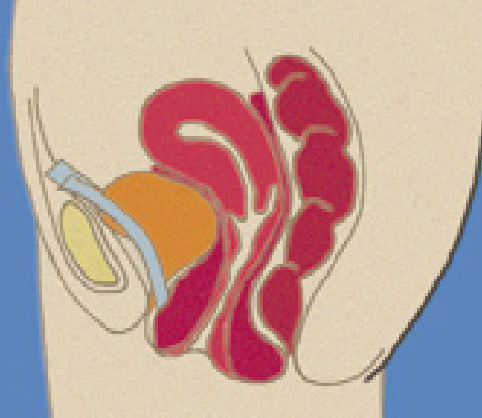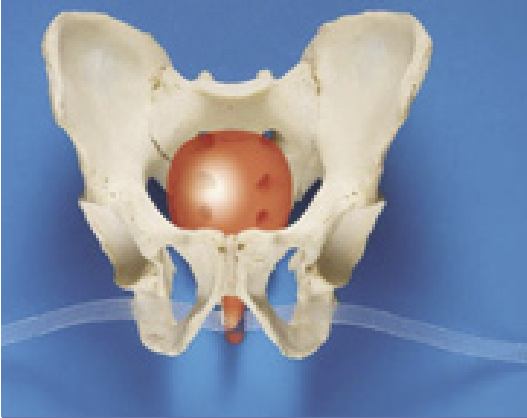

Įdėjimas transobturatorinėje srityje

T-Sling prakišamas per obturatoriaus angas link šlaunies linkio – per audinius gerokai žemiau šlapimo pūslės, be invazijos į užgaktinę sritį. Todėl išvengiama galimų komplikacijų, pvz., kraujagyslių traumų ir šlapimo pūslės ar žarnų perdūrimų. Atlikus šią procedūrą, nebūtina reguliari cistoskopija.

Transvagininis įdėjimas

Transvagininės adatos pravedamos nukreipiant į viršų nuo užgaktinių pjūvių. T-Sling vietoje laiko trintis tarp tinklelio ir audinio. Įrėžtas audinys galiausiai užfiksuoja tinklėlį vietoje, neleidžiamas jam judėti.

Įdėjimas užgaktinėje srityje

T-Sling implantuojamas atliekant mažytį makšties pjūvį šlapimo pūslės kaklelio lygyje. Priemonė įdedama įvedimo už gaktos adatomis.

Daugkartinio naudojimo adatos sutaupo daug išlaidų

Įvedimo adatas galima sterilizuoti ir naudoti pakartotinai, todėl jos atsieina žymiai pigiau nei vienkartinės adatos. Dėl ergonomiško dizaino jomis gali naudotis ir dešiniarankiai, ir kairiarankiai. Parduodamos daugkartinio naudojimo įvedimo adatos, skirtos transobturatoriniam, transvaginiam ir užgaktiniam įvedimui.


Supaprastintas traukimo kilpos priėjimas

Naujoviškos rantiškos adatos ir traukimo kilpos dizainas palengvina įvedimą. Unikali siūlių konfigūracija ir apsauginis apvalkalas paprastina išdėstymą.




Informacija apie T-Sling su Biosorb gaminių užsakymą

T-Sling

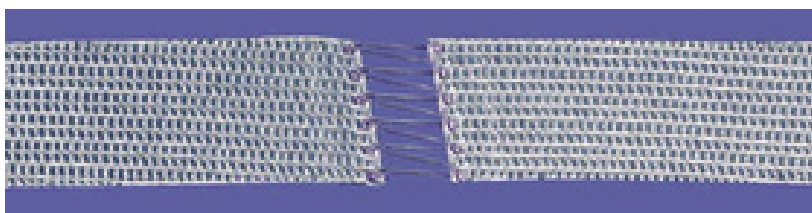

2 cm x 21 cm

T-Sling TS02

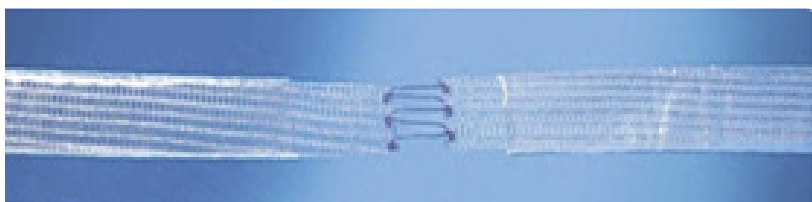

1.1 cm x 45 cm

T-Sling TS05

Daugkartinio naudojimo adatos



Daugkartinio naudojimo transobturatoriaus adata ND-TO01



Daugkartinio naudojimo transvagininė adata* ND-TV01

*Galima naudoti viršgaktinėje ar transvagininėje srityje



Daugkartinio naudojimo viršvagininė adata ND-ST01

Išlaidų taupymas

Daugkartinio naudojimo adatos pakeičia brangius vienkartinio naudojimo rinkinius



T-Sling su Biosorb gaminius gamina *Herniamesh S.r.l.* – pirmaujanti viengijo polipropileno ir polidioksanuno chirurginių tinkelių gamintoja. Herniamesh nemažai išteklių skiria tyrimams, plėtotei, gaminių atnaujinimui ir tobulinimui bei didžiuojasi gaminanti tinkelius, kurie mokslinėje bendruomenėje puikiai atpažįstami ir laikomi aukščiausios kokybės gaminiiais.

T-Sling su Biosorb™ gaminiai apsaugoti patentu, suteiktu išradėjui Arnaldo F. Trabucco MD, FACS (patento numeris 6306079)

CE
0546



FDA aišk. 510(k) #K020652

Polhernia®

Įgaliotas *Herniamesh* atstovas Lenkijoje ir Rytų Europos šalyse.
ul. Czarny Dwor 8, Gdansk 80-365, Poland
e-mail: info@polhernia.pl
www.polhernia.pl

Atstovas Lietuvoje: Irenos Simelevicenes Firma
Paplauros g. 3, 2014 Vilnius, Lietuva
Mob.tel. +370 600 22515 Tel. +370 5 2600040
Fax +370 5 2784617 irenasimel@one.lt